



Bezprzewodowa ultradźwiękowa waga kolumnowa z legalizacją CHARDER MS4980 (EMR ready) ze wzrostomierzem ultradźwiękowym



Product codes:

Reference: MS4980+HM200U

Product short description:

CHARDER MS4980 to legalizowana (klasa III) stacja pomiaru wzrostu i wagi pacjentów. Łatwa integracja bezprzewodowa z EMR placówki medycznej (**EMR ready**). Oczywiście może też działać samodzielnie lub przesyłać pomiary bezpośrednio do 1 urządzenia. W komplecie wzrostomierz ultradźwiękowy HM200U.

Product description:



Cały proces następuje automatycznie - od skanowania identyfikatora pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych poprzez pomiar ultradźwiękowy wzrostu i wagi oraz dalszą transmisję danych, aby wyeliminować błędy ręcznego wprowadzanie




danych oraz zmniejszyć obciążenie pracą personelu medycznego. Dane pomiarowe wyświetlane są również na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu wagi.

Dzięki automatycznej transmisji możesz zminimalizować błędy w transkrypcji i efektywniej spędzać czas na innych zadaniach!

Dane techniczne:

- Obciążenie maksymalne: 300 kg
- Dokładność odczytu: 100 g
- wyświetlacz LCD dotykowy
- Zasilanie: akumulatorowe i sieciowe (zasilacz w zestawie).
- Funkcje: Body Mass Index, Hold, Tare, Pre-Tare
- Opcjonalnie do wagi kolumnowej: **skaner**.

Cechy i funkcje panelu wagi CHARDER MS4980:

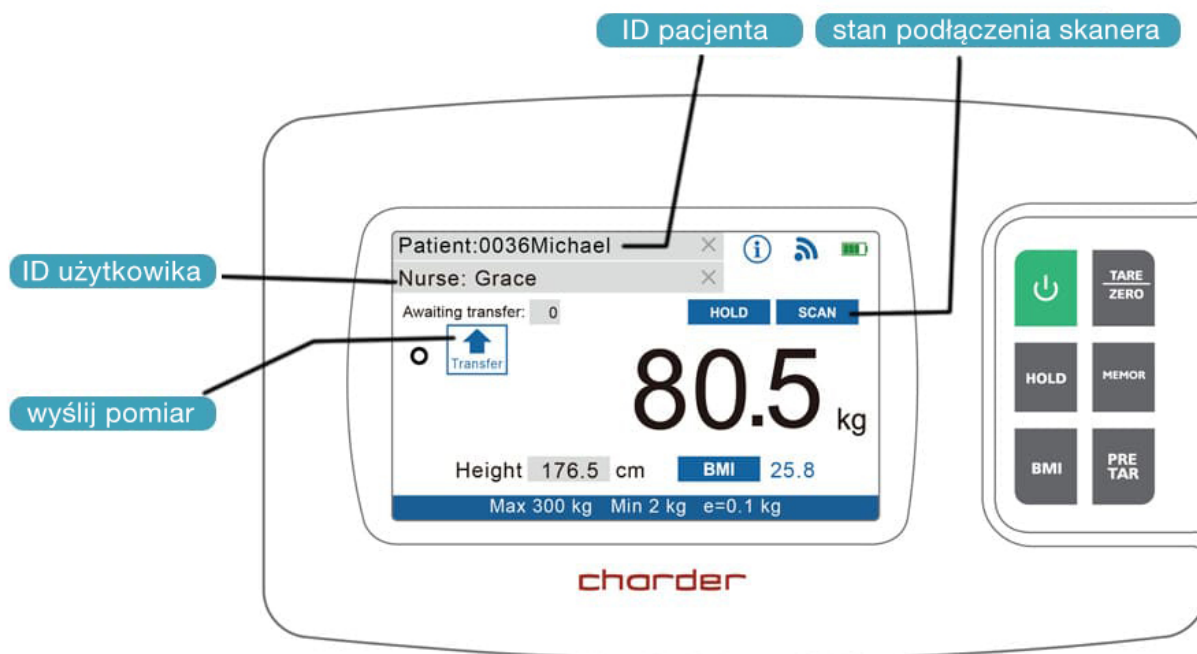

Zastosowanie unikatowego wzrostomierza elektronicznego pozwoliło na całkowicie automatyczny pomiar (nie ma konieczności ustawiania ogranicznika wzrostomierza na głowie pacjenta) co umożliwia natychmiastowe przesłanie pomiaru do systemu IT placówki medycznej (EMR ready scale).

Suma cech (czytnik kodów paskowych, ultradźwiękowy wzrostomierz, automatyczne przesłanie danych) stawia o nowatorstwie urządzenia, które w tej formie jest kompetentną nowością na rynku.

Unikatowość urządzenia zostało nagrodzone Złotym Medalem targów medycznych Salmed 2022.

Produkty marki Charder mimo najwyższej jakości wykonania i nowatorstwa są najczęściej tańsze od produktów konkurencyjnych.

Pomiar pacjenta przy użyciu stacji pomiarowej CHARDER MS4980 dokonywany jest w następujących krokach:

1. Nadaj pacjentowi ID/identyfikator pacjenta (np. podczas przyjęcia pacjenta do szpitala), aby urządzenie mogło szybko skanować i zapisywać wyniki podczas procedury pomiarowej.
2. Wysterylizuj platformę i w razie potrzeby wprowadź odliczenie wagi przed pomiarem.



3. Zeskanuj identyfikator użytkownika i pacjenta lub wprowadź ręcznie dane za pomocą ekranu dotykowego.
4. Pomiar wag i wzrostu zostanie dokonany automatycznie.
5. Prześlij dane pomiaru do systemu informatycznego placówki medycznej.
6. Zobacz wyniki w systemie - Porównaj wyniki z poprzednimi pomiarami, aby przeanalizować trendy. Oprogramowanie jest bezpłatne.



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4



Krok 5



Krok 6

Dane techniczne wzrostomierza HM200U:

- Zakres pomiaru: 120 - 200 cm.
- Podziałka: 1 mm.
- Waga 1,2 kg.
- Pomiar wysokości przesyłany jest bezpośrednio do wagi.

Product features:

Product attributes:

Skaner: TAK, NIE

