



Waga krzesłkowa bariatryczna Charder z legalizacją MS 5480 (III) z bezprzewodową transmisją danych (EMR ready)



Product codes:

Reference: MS5480

Product short description:

CHARDER MS5480 to legalizowana (klasa III) waga krzesłkowa, bariatryczna. Łatwa integracja bezprzewodowa z EMR placówki medycznej (**EMR ready**). Oczywiście może też działać samodzielnie lub przysyłać pomiary bezpośrednio do 1 urządzenia.

Product description:



Cały proces następuje automatycznie - od skanowania identyfikatora pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych poprzez dodanie pomiaru wzrostu zainstalowanym na wadze wzrostomierzem oraz dalszą transmisję danych, aby wyeliminować błędy ręcznego wprowadzania danych oraz zmniejszyć obciążenie pracą personelu medycznego. Dane pomiarowe wyświetlane są również na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu wagi.

Dzięki automatycznej transmisji możesz zminimalizować błędy w transkrypcji i efektywniej spędzać czas na innych




zadaniach!

Dane techniczne:

- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg.
- Działka elementarna: 100 g.
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 536 x 460 x 480 mm.
- Wysokość umieszczenia siedziska: 730 mm.
- **waga medyczna, zalegalizowana klasy III,**
- **4 kółka skrętne** pozwalają na mobilność na dłuższe dystanse,
- **4 kółka z blokadą pozwalają na bezpieczne użytkowanie (zabezpieczają przed niekontrolowanym cofnięciem się wózka i upadkiem pacjenta)**
- uchylny podłokietnik **ułatwia swobodne wsiadanie i zsiadanie,**
- **ergonomicznie wyprofilowane siedzisko z antypoślizgową fakturą zabezpiecza przed zsunieniem się pacjenta z wózka,**
- składane podnóżki **ułatwiają wstawanie i wsiadanie,**
- **składana konstrukcja pozwala na natychmiastowe złożenie wagi (w celu łatwiejszego przechowywania i transportu)**
- **waga może pracować na bateriach (> 12.000 pomiarów na jednym komplecie baterii) lub może być zasilana zasilaczem sieciowym (w zestawie),**
- **podłączenie do komputera (poprzez USB)** pozwala na transmisję danych pomiarowych,
- waga pozwala na obliczenie parametrów **BMI i powierzchni ciała pacjenta BSA,**
- funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie,
- kompaktowe opakowanie,
- legalizacja i CE,
- gwarancja: 24 miesiące.

Cechy i funkcje panelu wagi CHARDER MS5480:

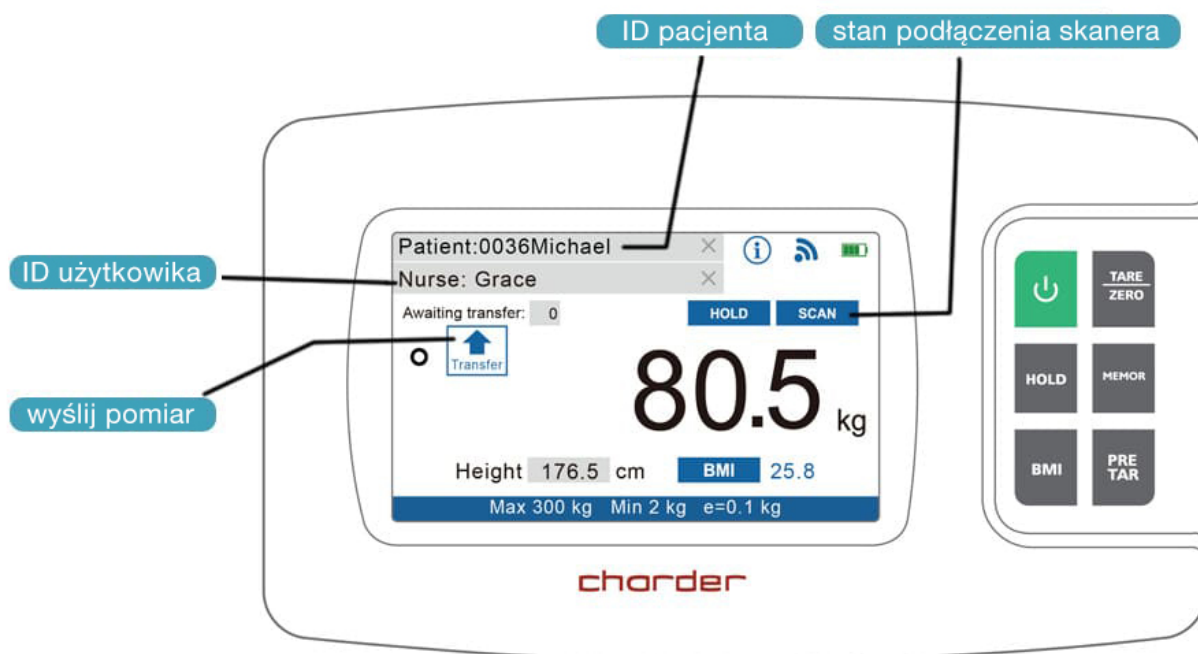

Suma cech (czytnik kodów paskowych, automatyczne przesłanie danych i możliwa łatwa integracja z systemem placówki medycznej) stawia o nowatorstwie urządzenia, które w tej formie jest kompetentną nowością na rynku.



Produkty marki Charder mimo najwyższej jakości wykonania i nowatorstwa są najczęściej tańsze od produktów konkurencyjnych.

Pomiar pacjenta przy użyciu bezprzewodowej wagi platformowej CHARDER MS5480 dokonywany jest w następujących krokach:

1. Nadaj niemowlęciu identyfikator - ID pacjenta aby urządzenie mogło szybko skanować i zapisywać wyniki podczas procedury pomiarowej.
2. Wysterylizuj platformę i w razie potrzeby wprowadź odliczenie wagi przed pomiarem (PRE-TARA). Zeskanuj identyfikator użytkownika i niemowlęcia lub wprowadź ręcznie dane za pomocą ekranu dotykowego.
3. Pomiar wagi zostanie dokonany automatycznie, ustaw wzrostomierz do długości dziecka - wartość zebrana zostanie automatycznie (przy zastosowaniu wzrostomierza elektronicznego).
4. Prześlij dane pomiaru do systemu informatycznego placówki medycznej,
5. Zobacz wyniki w systemie - Porównaj wyniki z poprzednimi pomiarami, aby przeanalizować trendy. Oprogramowanie jest bezpłatne.



Product features:

Product attributes:

