

Lampa zabiegowo-operacyjna bezcieniowa S250M przejezdna



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: LUVIS S250 MOBILE

Krótki opis:

Lampa zabiegowo-operacyjna S2500 przejezdna z regulacją natężenia światła, regulacją temperatury barwowej oraz regulacją pola roboczego i trybem ENDO. Zastosowano technologię minimalizacji cienia.

Opis produktu

Zastosowano technologię rozpuszczania światła w celu minimalizacji cienia poniżej zasłoniętej przestrzeni roboczą. Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw Ra, R9 = 97.

Technologia redukcji cienia

Technologia redukcji cienia to unikalna technologia optyczna, która zapewnia wyraźny obraz przestrzeni oglądanej z minimalizacją cienia. Rozwiązanie wykorzystuje innowacyjny, opatentowany przez producenta system soczewek z źródłami LED i odbłyśnikami.



Luvis




Halogen



Dane techniczne:

- źródło światła – 34 diody Led,
- Zastosowano technologię rozpuszczania światła w celu minimalizacji cienia poniżej zasłoniętej przestrzeni roboczej
- regulacja natężenia światła w zakresie: 40 000 - 110 000 lux (w trzech krokach),
- max. natężenie światła 110 000 lux z odl. 1m,
- regulowana średnica pola roboczego w 3 krokach: min. 15 cm / max. 25 cm,
- regulowana temperatura barwowa: 3800 / 4300 / 4800 K,
- tryb ENDO,
- regulacja parametrów pracy lampy z panelu dotykowego z boku czaszy, regulacja podstawowych funkcji przez dodatkowy panel dotykowy koło wymiennej ręczki lampy.
- wielkość czaszy: 37.2 x 38 cm,
- średni czas żywotności diod: 60000 h,
- Bardzo wysoki wskaźniki oddawania barw: Ra 97,
- w zestawie wymienna ręczka do ustawiania położenia czaszy (sterylizowana),
- przyrost temperatury w polu roboczym 1°C,
- lampa posiada certyfikację medyczną
- zasilanie 100-240V, 50/60Hz,
- wyprodukowano w Korei.

Luvis S250
3.800~4,800K

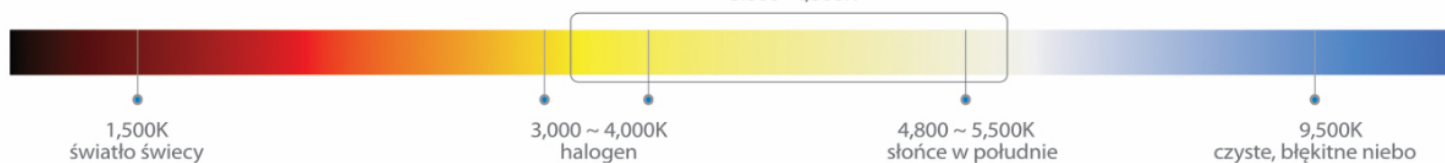

Sterowanie dotykowe przy uchwycie



Intensywność oświetlenia
3 poziomy regulacji (Max. 110,000 lx)



Wielkość plamy świetlnej
3 poziomy regulacji (Max. 25cm / Min. 15cm)



Temperatura barwowa
3,800K / 4,300K / 4,800K



Wskaźnik oddawania barw
Ra 97 / R9 97



Tryb ENDO
3 poziomy regulacji
(Max. 15,000lx / Min. 5,000lx)



Zmniejszenie plamy świetlnej

Zwiększenie plamy świetlnej

Regulacja intensywności (1 → 2 → 3 → 1, → ...)

Cechy produktu:

Atrybuty produktu: