

Elektroniczna waga do 300 kg platformowa bariatryczna Charder MS2580 (EMR ready) z poręczą z legalizacją i funkcją BMI



Nr Katalogowy:

Nr. katalogowy: MS2580

Krótki opis:

Do 300 kg, z łącznością bezprzewodową, dotykowym ekranem, niską platformą, funkcją BMI, TARA, HOLD i wysoką dokładnością.

Opis produktu




Cały proces następuje automatycznie - od skanowania identyfikatora pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych poprzez pomiar ultradźwiękowy wzrostu i wagi oraz dalszą transmisję danych, aby wyeliminować błędy ręcznego wprowadzania danych oraz zmniejszyć obciążenie pracą personelu medycznego. Dane pomiarowe wyświetlane są również na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu wagi.

Dzięki automatycznej transmisji możesz zminimalizować błędy w transkrypcji i efektywniej spędzać czas na innych zadaniach!

Dane techniczne:

- Dopuszczalne obciążenie - 300 kg,
- Dokładność odczytu - 100 g,
- Funkcja **Tara, HOLD, BMI**,
- Funkcja automatycznego wyłączenia co 120 s, 180 s, 240 s,
- Duży, podwójny wyświetlacz LCD,
- Port USB,
- Poziomica do regulacji poziomu,
- Zasilanie - bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie),
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550x550x1090 mm,
- Masa własna 17 kg,
- Niski profil platformy,
- Gwarancja - 24 miesiące.
- Opcjonalnie: wzrostomierz ultradźwiękowy HM200U

Cechy i funkcje panelu wagi CHARDER MS2580:

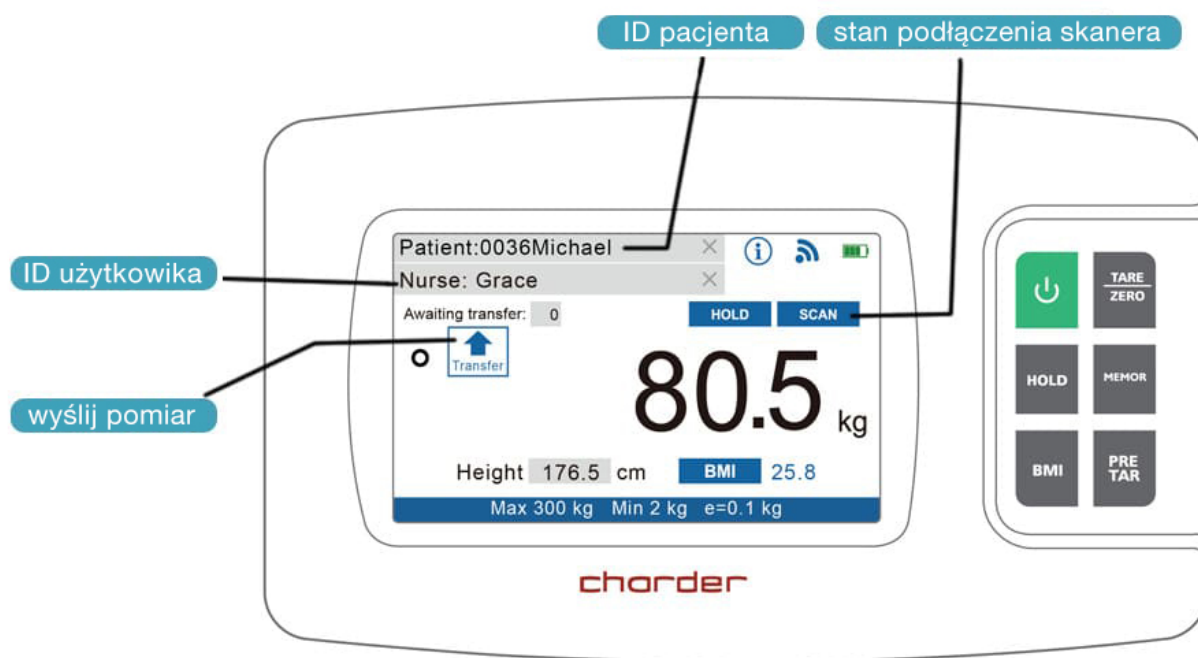

Zastosowanie unikatowego wzrostomierza elektronicznego pozwoliło na całkowicie automatyczny pomiar (nie ma konieczności ustawiania ogranicznika wzrostomierza na głowie pacjenta) co umożliwia natychmiastowe przesłanie pomiaru do systemu IT placówki medycznej (EMR ready scale).

Suma cech (czytnik kodów paskowych, ultradźwiękowy wzrostomierz, automatyczne przesłanie danych) stawia o nowatorstwie urządzenia, które w tej formie jest kompetentną nowością na rynku.

Unikatowość urządzenia zostało nagrodzone Złotym Medalem targów medycznych Salmed 2022.

Produkty marki Charder mimo najwyższej jakości wykonania i nowatorstwa są najczęściej tańsze od produktów konkurencyjnych.

Pomiar pacjenta przy użyciu stacji pomiarowej CHARDER MS4980 dokonywany jest w następujących krokach:

1. Nadaj pacjentowi ID/identyfikator pacjenta (np. podczas przyjęcia pacjenta do szpitala), aby urządzenie mogło szybko skanować i zapisywać wyniki podczas procedury pomiarowej.
2. Wysterylizuj platformę i w razie potrzeby wprowadź odliczenie wagi przed pomiarem.
3. Zeskanuj identyfikator użytkownika i pacjenta lub wprowadź ręcznie dane za pomocą ekranu dotykowego.
4. Pomiar wag i wzrostu zostanie dokonany automatycznie.
5. Prześlij dane pomiaru do systemu informatycznego placówki medycznej.
6. Zobacz wyniki w systemie - Porównaj wyniki z poprzednimi pomiarami, aby przeanalizować trendy. Oprogramowanie jest bezpłatne.



Cechy produktu:

Atrybuty produktu: